

RELATÓRIO TÉCNICO

MACACÃO LAMINADO DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO 50G

MEDIX BRASIL

GARANTIDO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 Cascavel – Paraná – Brasil

CEP: 85812-010

Fone/ Fax: (45) 3039 42 42 medix@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Evelyn Aline Pante Mantovani CRF-PR Nº 19619 Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368



1. PRODUTO

Medix Brasil Macação laminado 50g, punho, barra e capuz com elastex, fechamento com zíper, descartável. Tamanho: Único.

Cores: branca, azul, verde, amarelo, rosa

Registro Anvisa: 80495510092

2. INDICAÇÃO

Seu uso é indicado para higiene e proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos hospitalares, clínicos, odontológicos, farmacêuticos, laboratoriais, estéticos, Industriais, Químicos, Têxtil e gastronômicos. Roupa privativa para procedimento não cirúrgico utilizado por profissionais de saúde, pacientes e demais profissionais. Produto de uso único.

3. CONDIÇÕES MANIPULAÇÃO

Vestir o macação com as mãos limpas e secas;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não utilizar sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

4. MODO DE USO

Desdobrar o produto, abrir o zíper, entrar no macacão primeiramente colocando as pernas e em seguida encaixando os braços, colocar o capuz na cabeça e por último fechar o zíper.

5. COMPOSIÇÃO

Medix Brasil Macacão laminado Descartável, é inteiramente confeccionado em tecido não tecido (TNT) 74% de polipropileno + 26% polietileno com aditivo Masterbach. Através da tecnologia SS ou SSS + laminação diamante ou oval. Com elastex nas costas, mangas, barras e capuz.

Não estéril, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, descartável, de uso único.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho único: Tórax 71cm±2cm, comprimento total sem capuz 185cm±2cm, comprimento entrepernas 84,5cm±2cm, comprimento da gola até a barra manga 98cm±2cm, punho 13cm±2cm, barra 20cm±2cm.

é inteiramente confeccionado em tecido não tecido (TNT) 74% de polipropileno + 26% polietileno com aditivo Masterbach.

Fechado com costuras overlok em todo o perímetro.

Fechamento na frente, através de zíper.


Com mangas longas que possuem terminação nos punhos com elastex.

Barra, costas e capuz com elastex



Não Estéril.

Disponível na cor branca ou azul ou verde ou amarelo ou rosa. Atóxico, Apirogênico, hipoalergênico, Descartável e de uso único.

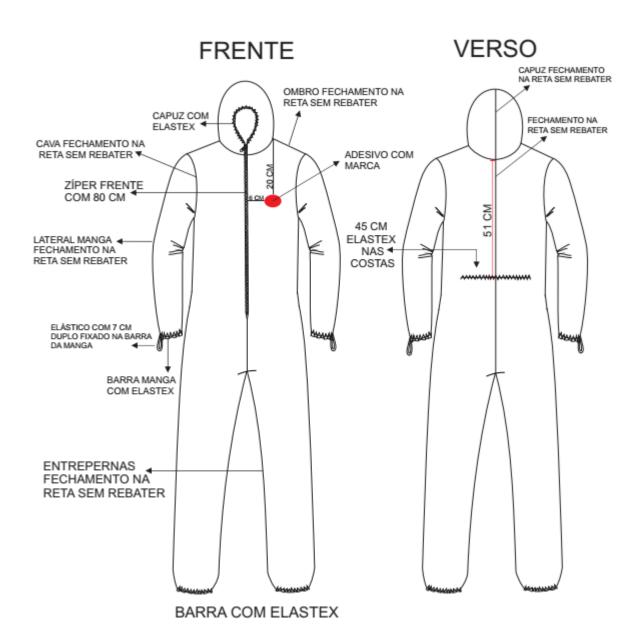



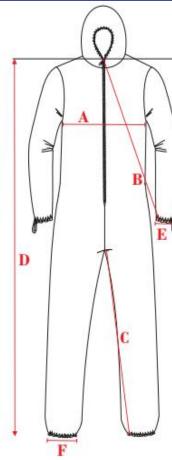


TABELA DE MEDIDAS			
		TAM. ÚNICO	TOLERÂNCIA
Α	TORAX	71 CM	2+-
В	COMPRIMENTO TOTAL SEM CAPUZ	185 CM	2+-
С	COMPRIMENTO ENTREPERNAS	84,5 CM	2+-
D	COMPRIMENTO DA GOLA ATE A BARRA MANGA	98 CM	2+-
E	PUNHO	13	2+-
F	BARRA	20	2+-

7. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE

Evitar umidade ou temperatura alta,

Não deixar exposto ao sol.

Manter longe de produtos químicos corrosivos, manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar.

8. CUIDADOS/ PRECAUÇÕES

Produto de utilização única;

Destruir imediatamente após utilização única;

Não estéril.

Certificar-se de que o produto está bem ajustado ao corpo.

9. EMBALAGEM

Embalagem primária: pacote plástico contendo 1 unidade. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 50 unidades (com 50 pacotes de 1 unidade cada um).

10. VALIDADE

5 anos após a data de fabricação.